

Вертикализатор Мультистендер-1

Универсальная система для стояния,
3 положения с абдукцией или нейтральным положением ног,
для детей с нарушениями средней и высокой степени тяжести,
в возрасте от 9 месяцев до 6 лет.



Поддержит вас всегда!

Вертикализатор Мультистендер-1

Эта универсальная система для стояния подходит для детей в возрасте примерно от 9 месяцев до 6 лет и обеспечивает высокий уровень постральной поддержки в вертикальном, прональном и супинальном положении, с возможностью абдукции или нейтрального положения ног.

Уникальная амплитуда регулировки высоты и ширины в сочетании с максимальным весом пользователя до 35 кг делают Мультистендер идеальным выбором для растущих детей в многопользовательской среде. Плавная и простая регулировка угла наклона переводит Мультистендер из горизонтального положения в вертикальное, что облегчает трансфер и дает неограниченные возможности для установки точного угла стояния, необходимого для каждого ребенка.

Намеренно открытый дизайн позволяет видеть позиционирование пользователя каждую минуту. Безупречная поддержка грудной клетки и таза в сочетании с возможностями регулировки положения ног делают Мультистендер отличным выбором практически для любого ребенка. Если вам нужна гибкость, у Мультистендера она есть!

Инновации

Деротационные ремни для грудной клетки и таза с боковыми поддерж. подушками.

Ремни застегиваются в центре и регулируются независимо с каждой стороны, позволяя выравнять по средней линии. Пряжки и липучки фиксируют настройку ремней, затрудняя ее изменение другими детьми! Подушечки поставляются в малом, среднем и узком размере.

Инновации

Поддержка головы

Доступен ряд различных опций поддержки головы - от мягкой поддержки с помощью Изогнутого подголовника до высокого уровня поддержки с помощью Подголовника Multigrip

Инновации

Прональный/супинальный регулируемый столик

Регулируется по высоте, углу наклона и глубине, с уникальными вставками для предотвращения зазоров, в которых могут застрять руки при супинальном стоянии. Поставляется с пазами для локтевых блоков и рельефной контрастной окантовкой столика, которая может служить как визуальным барьером для детей, так и полезной точкой крепления игрушек или других сенсорных средств.

Инновации



Позиционирование ног

Можно выбрать как простую подножку с регулировкой угла наклона, так и отдельную для разведения ног. Обе опции могут поощрять или смягчать тыльное или подошвенное сгибание стопы.

Практичный современный вид

Белая рама придает свежий современный вид, одновременно позволяя легко заметить и очистить загрязнения до того, как они станут трудноудаляемыми.



Инновации

Независимо регулируемые поддерживающие блоки для грудной клетки и таза

Позволяют учитывать индивидуальные пропорции каждого ребенка, а также избежать давления на деликатные области, такие как соски.

Инновации

Раздельная абдукция

Благодаря этой опции можно раздельно отводить ноги до 30° с шагом 5° . Аксессуар для абдукции был разработан таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие сверстников с ребенком, стоящим близко к полу.

Инновации

Регулировка угла наклона

Угол наклона рамы можно регулировать с помощью плавного пневматического механизма с пользователем в стендере. Установить нужный угол легко с помощью указателя угла на раме. При использовании в супинальном положении раму можно перевести в горизонтальное положение для облегчения трансфера.

Всегда вас поддержит...

Стояние это отличный способ улучшить мироощущение вашего ребенка и способствовать его развитию.

Улучшает
циркуляцию крови



Способствует
пищеварению и
физиологическим
отправлениям



Способствует
развитию
костномышечной
системы



Дает возможность
воспринимать мир



Дети получают огромную психологическую помощь от стояния, а также поддержку физического и когнитивного развития.



Помогает дыханию
и речи



Помогает снизить
давление в
результате сидения



Поддерживает таз,
бедр и стопы. Дети
могут заниматься
обычными делами



Дает возможность
улучшить
социальные
навыки



Инновации

Полиуретановые подушки

Легко моются и водонепроницаемые! Поддерживающие блоки и подушечки на Мультистендере изготовлены из полиуретана, в состав которого входит противомикробное средство. Это гарантирует, что на Мультистендере быстро и легко поддерживать чистоту, что облегчает повторное использование и инфекционный контроль для нескольких пользователей.



Аксессуары

Мультистендер 1 это модульный продукт, который легко приспособить к любым потребностям пользователя с помощью конкретных аксессуаров.

Рама Мультистендера 1

Рама Мультистендера включает в себя:

- Основание с 4 запирающимися поворотными роликами
- Монтажные кронштейны коленных блоков*
- Подножка с регулируемым углом наклона (нейтральное положение) или раздельная подножка с регулируемым углом наклона (положение абдукции)

*ПРИМЕЧАНИЕ: Коленные блоки необходимо заказывать отдельно



Поддерживающие блоки

Полиуретановые поддеоживающие блоки для туловища и таза.

Выбор из 6 цветов



Многопозиционный подголовник (только для супинального положения)

Оригинальный подголовник Multigrip регулируется по высоте, глубине и углу наклона и доступен в трех размерах.



Овальный или Изогнутый подголовник (только для супинального положения)

Для детей которым требуется небольшая поддержка головы. Устанавливается на гибком кронштейне, позволяющем регулировать высоту, глубину и угол наклона. Выбор из 6 цветов



Поддерживающие подушечки

Подушечки из полиуретана можно использовать на бедрах или груди, они регулируются по высоте, ширине и углу наклона и могут быть смещены для фиксации сколиоза или для удовлетворения особых потребностей в позиционировании. Поставляются в комплекте с деротационным ремешком соответствующего размера в стандартной комплектации. Выбор из 6 цветов



Гибкие поддерживающие подушечки для грудной клетки

Доступны в двух размерах. Супергибкие подушечки с ремешками обеспечивают отличное позиционирование с заботой о комфорте. Независимая настройка по высоте и ширине дает максимальный контроль туловища. Выбор из 6 цветов




Подвеска-жилет

Обеспечивает дополнительную устойчивость туловища и плеч для детей с низким тонусом. Инновационная застежка-молния, которая расстегивается снизу вверх, обеспечивает легкий доступ к гастростоме. Выпускается в 2 размерах, ткань легко протирать салфеткой.



Столик

Легко крепится и регулируется по высоте, углу наклона и глубине, в комплекте со съемной вставкой для использования в прональном положении.

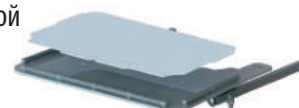

Опора для груди

Небольшой грудной поддерживающий блок из пеноматериала, полезен при необходимости усилить разгибание грудной клетки и улучшить контроль головы. Для использования необходим чехол.



Чехлы поддерживающих блоков

Съемные чехлы оборачиваются вокруг поддерживающих блоков для грудной клетки и таза, а также используются с опорой для груди. Выбор из 6 цветов



Локтевые блоки

Используются для приведения рук к положению средней линии и / или для ограничения чрезмерного отведения.



Аксессуар для абдукции

Аксессуар позволяет раздельно отводить ноги от 0 до 30° с шагом 5°. Настройка не требует инструментов. Можно заказать как отдельный аксессуар, чтобы дооснастить имеющийся Мультистендер (выпущенный позже 2015 года).



Коленные поддерживающие блоки

Инновационные и гибкие коленные блоки из полиуретана доступны в 2 размерах, регулируются по высоте, ширине, углу наклона и глубине. В комплекте с мягкими деротационными ремешками. Выбор из 6 цветов.



Сандалии

Поставляются в 2 размерах. Можно позиционировать стопы разного размера, даже при ношении шин. Сандалии Jeph взаимозаменяемы во всем ассортименте изделий Jeph для стояния и сидения.



Манжеты для голеностопов

Дополнительный аксессуар для ног к стандартным сандалиям, манжеты снабжены уникальной магнитной застежкой, которой можно управлять одной рукой.



Повышающие блоки для сандалий

Для сандалий Jeph любого размера, повышающие блоки придают сандалиям дополнительную высоту там, где это необходимо! Используйте для устранения несоответствия длины ног или для увеличения высоты подножки, чтобы максимально увеличить рост.

ПРИМЕЧАНИЕ: Один комплект необходим для каждой отдельной сандалии.



Цвета Мультистендера-1



Синий



Розовый



Зеленый



Красный



Серый



Черный



Инновации

Коленные блоки

Можно заказать в двух размерах. Они снабжены специальными ремнями и независимо регулируются по высоте, ширине, глубине, углу наклона, обеспечивая оптимальное позиционирование каждому ребенку.

Технические характеристики

	Ед. изм-ния	Модель MUS 01 размер 1	Модель MUS 01 FABD с абдукцией размер 1
Максимальная нагрузка	гг	35	35
Угол наклона	градусы	10°-90°	90°-10°
Возраст пользователя	—	9 месяцев – 6 лет	9 месяцев – 6 лет
Максимальный рост пользователя	см	620-1160	600-1160
Ширина рамы	см	61,5	61,5
Длина рамы	см	76	76
Высота (от подножки до верхнего края поддержки)	см	49-85	50-89
Высота (от подножки до подголовника)	см	62-116	60-116
Ширина поддержки грудной клетки	см	14-27,5	15-26
Ширина поддержки бедра	см	14-27,5	12-26
Ширина поддержки коленей (между двумя центральными точками)	см	12-19	13-17,5
Общая высота вертикализатора (от пола до верхнего края поддержки)	см	67-94	61-94
Угол наклона подножки	градусы	-15°-+15°	-15°-+15°
Угол абдукции (для установки макс. угла подножка должна быть на расстоянии не менее 14 см от пола)	градусы		0 - 30°

Rehab **medical**

Rehab and Medical Limited,
259 Didsbury Road, Stockport, Cheshire SK4 3JG, UK,
Tel: + 44 161 431 5056,
www.rehabandmedical.co.uk
e-mail: info@rehabandmedical.com

ООО "РехабМедикал"
127254, г.Москва, ул. Добролюбова, дом 21А, корп. Б
телефон: (495) 488-68-64, +7(916)-502-0157
www.rehabmedical.ru, www.rehabsensory.ru,
e-mail: info@rehabmedical.ru